



Prosthetic KIT

*2025 Global Top Dental Implant Company


Neo
Biotech
Satisfaction to Dentists

修復工具盒(Prosthetic KIT) :



修復工具盒(Prosthetic KIT) :

① 結構

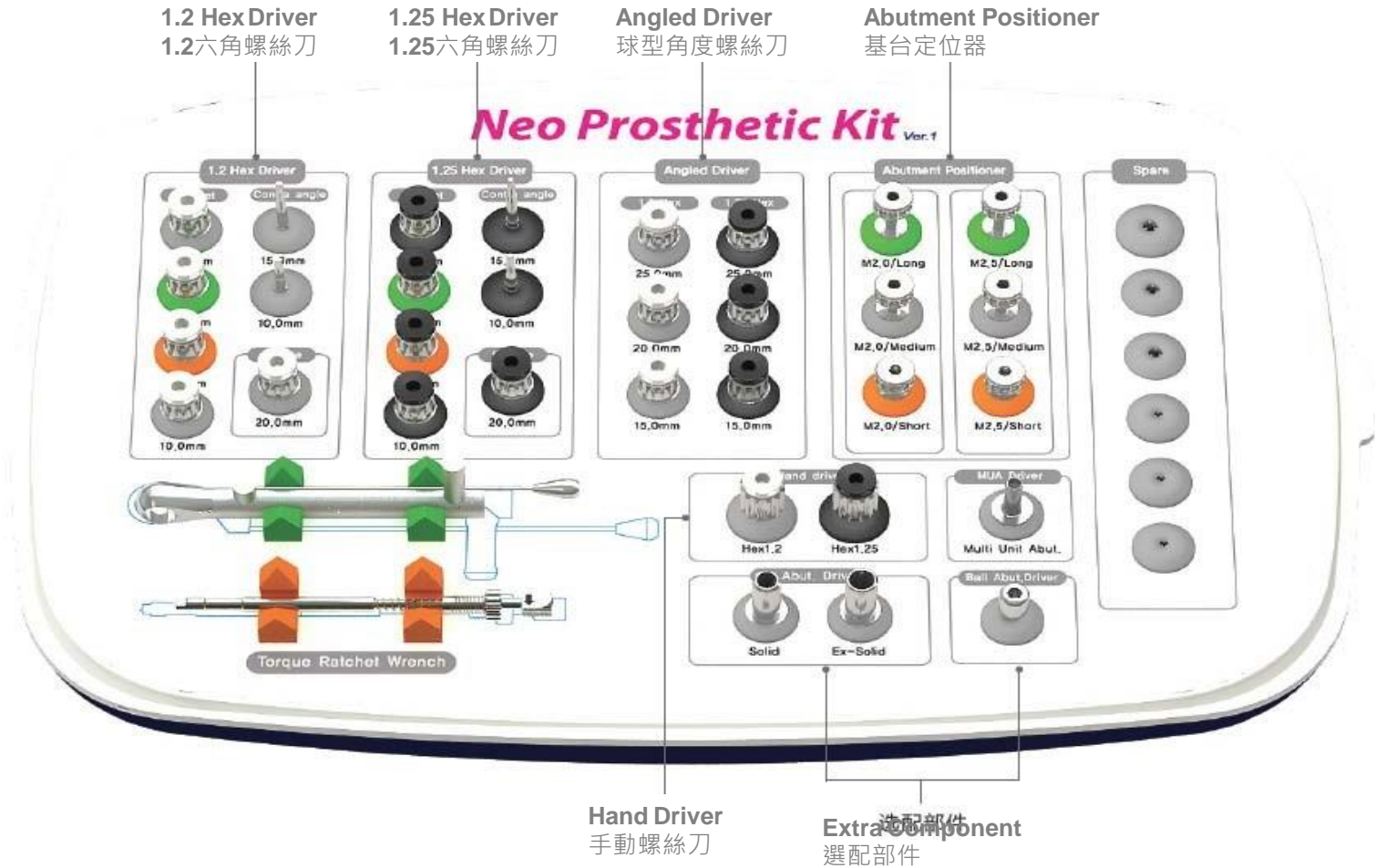

修復工具盒(Prosthetic KIT) :

② 配件說明 :

六角螺絲刀



1.2六角和1.25六角

球型角度螺絲刀



球型六角設計

當扭力大於38Ncm時·
螺絲刀會折斷

基台定位器




修復工具盒(Prosthetic KIT) :

六角螺絲刀(1.2/1.25)



修復工具盒(Prosthetic KIT) :

六角螺絲刀(1.2/1.25)

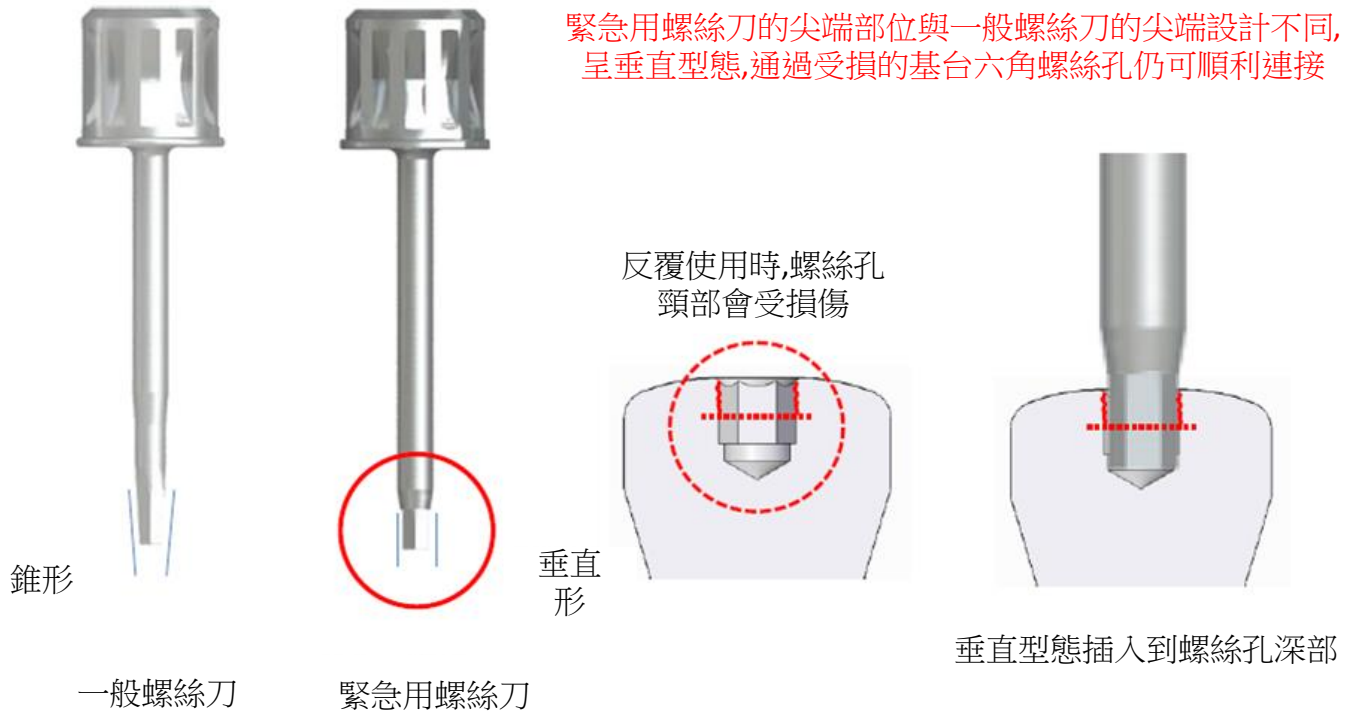

修復工具盒(Prosthetic KIT) :

六角螺絲刀(1.2/1.25)

六角螺絲刀所適用的種植體品牌/公司

1.2六角
(0.48")



紐白特,3i(Biomet),登士柏(Dentsply)-Friadent, Xive
奧齒泰,DIO,美格真等


1.25六角
(0.5")




Biohorizons ,杰美(Zimmer), Astra , Camlog
MIS,登騰, Dentis 等

修復工具盒(Prosthetic KIT) :

基台定位器(M2.0/M2.5)

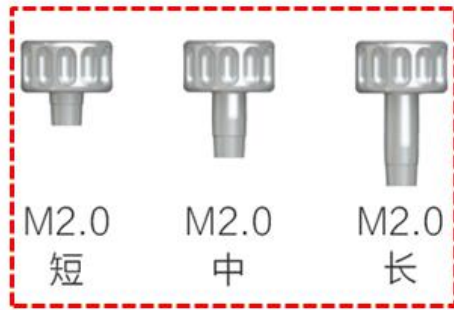

紐白特基台可互換

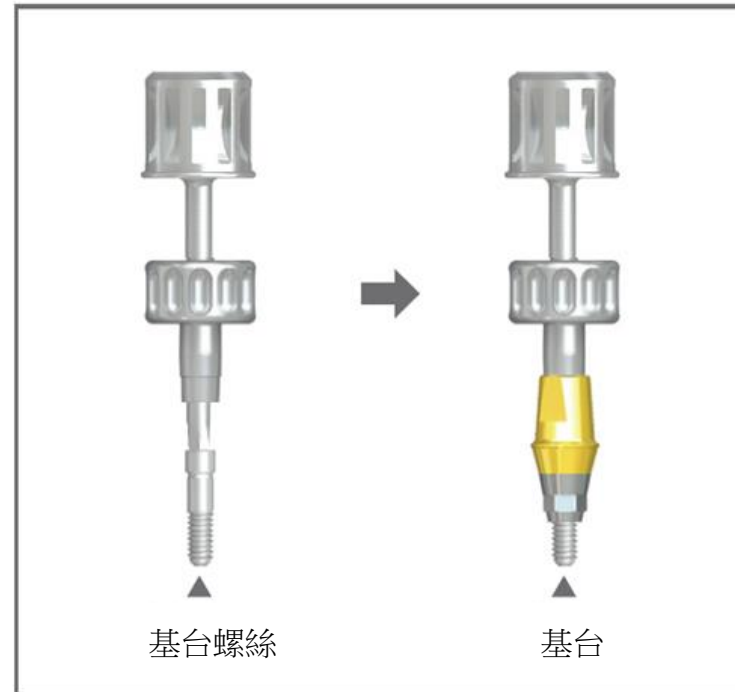

結合六角螺絲刀後連接,單手可以使用

修復工具盒(Prosthetic KIT) :

基台定位器(M2.0/M2.5)




修復工具盒(Prosthetic KIT) :

角度螺絲刀(六角1.2/1.25)



球型六腳設計

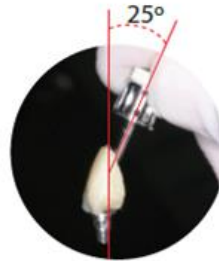






最大傾斜角度25度
最大扭力30Ncm



當扭力大於38Ncm時
螺絲刀會折斷

修復工具盒(Prosthetic KIT) :

角度螺絲刀(六角1.2/1.25)

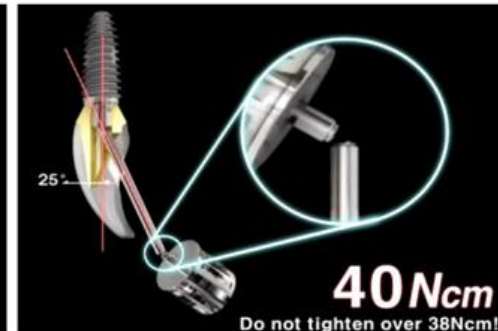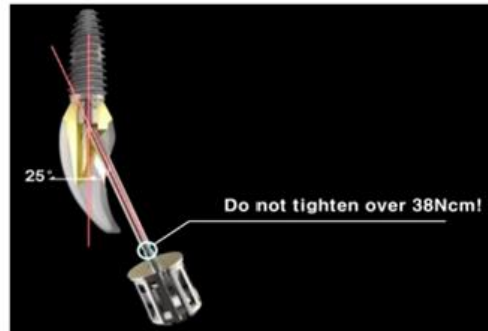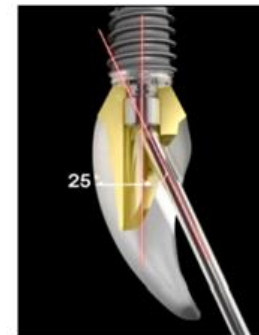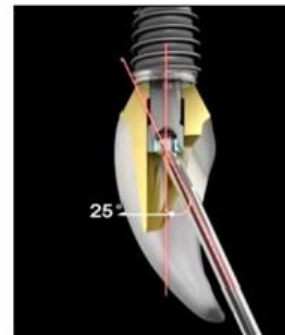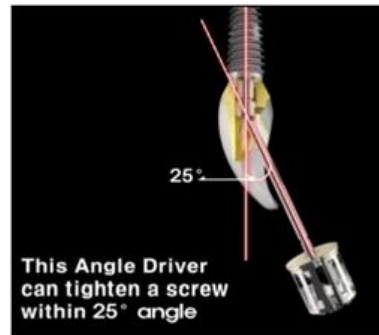

Thank you